



Brinite o vašem osmehu!

Dobre navike oralne higijene mogu da utiču na to da vaši implanti traju do kraja života. Ne zaboravite da novim zubima date pažnju koja im je potrebna. Redovna provera je važna kako biste bili sigurni da su implanti i maramica koja ih okružuje zdravi.

Vaš zubar/tehničar vas može posavetovati koji proizvodi najbolje odgovara vašim implantima.

Vašiimplanti:



TePe – Mi brinemo za zdrave osmehe

TePe je Švedska kompanija koja proizvodi i promoviše visoko kvalitetne proizvode za oralnu higijenu još od 1965. Dizajn, razvoj i proizvodnja je odvijaju u TePe predstavništvu u Malmeu, Švedskoj. Saradnji sa ekspertima stomatologije učinilo je TePe vodećim brendom za proizvodnju proizvoda za preventivnu zaštitu zuba. TePe četkice se internacionalno koriste na dnevnoj bazi od strane profesionalaca i korisnika u preko 50 zemalja sveta.

Za više saveta, posetite naš sajt.
www.dentamax.rs


DENTAMAX DOO

Dimitrija Tucovića 59
Zvezdara
11000 Beograd
+381 601913700
info@dentamax.rs

Manufactured in Sweden by TePe Oral Hygiene Products AB, Malmö, Sweden.

© TePe Oral Hygiene Products AB, 172015 / 2, 2011.

Nega implantata

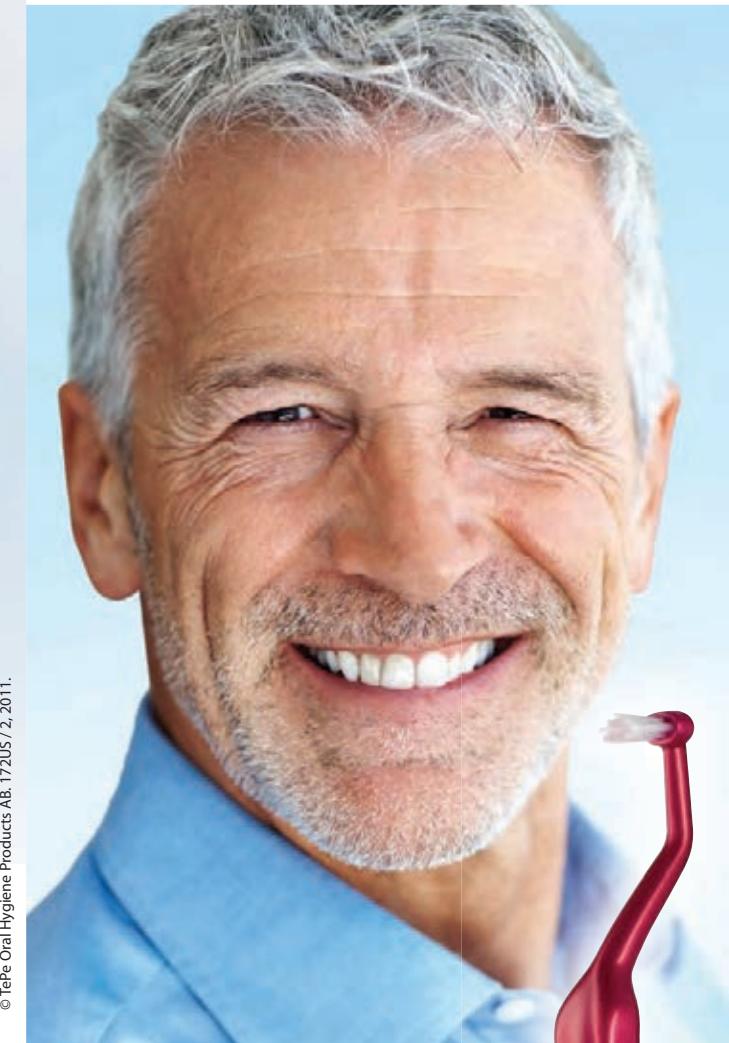

Uputstvo za korisnike



Različiti tipovi implanta zahtevaju različite tehnike, obično sa specijalnim uređajima. TePe ima veliki broj četkica koje su specijalno dizajnirane za čišćenje implanta, a sve su osmišljene u saranji sa profesionalcima na tom polju.




Implant - podržava krunice i mostove

Most koji podržava implant znači da je nekoliko zuba zamenjeno mostom, usidrenim u implant.




TePe Implant Care™

Sa zakrivljenim vratom i tankom glavom za lako čišćenje implantata sa unutrašnje strane.

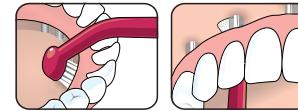

TePe Implant Brush

Meka vlakna u samo dva reda, ekstra uska glava i fleksibilan vrat koji olakšava pristup i čišćenje blizu implantata kao i žica fiksne proteze. Čisti sluzokožu usta i uporište implantata.

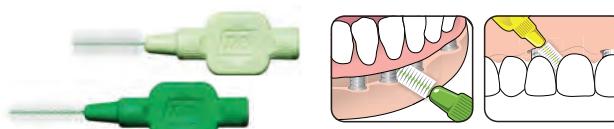

Sa i bez veštačkog tkiva desni.



Čišćenje implantata iznutra.

TePe Interdental Brushes

Za efektivno čišćenje između implantata.

TePe interdentalne četkice su dostupne u različitim veličinama, dizajnu i teksturi. Sve su plastične, sa premazanom žicom za sigurnu upotrebu.




TePe Compact Tuft™

Ova posebna četkica za zube ima mali vrh i kratka, veoma mekana vlakna. Stabilna drška i gust vrh čine ovu četkicu idealnom za precizno čišćenje teško dostupnih mesta.



TePe Dental Floss

Konac je idealan za korišćenje kada je interdentalni prostor uzak. TePe konac je spljošten i obložen radi efektnijeg čišćenja.

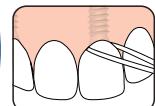


Implant-supported overdenture

Ovaj tip prenosive proteze je pričvršćem za potporne zidove implantata ili za priključak implantata.



TePe Compact Tuft™

Čisti oko nosača sa ugaonom četkicom koja ima malu, okruglu vrh

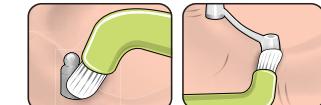


Interdentalna četkica je jednostavna za upotrebu kada se čisti ispod priključka implantata.



TePe Denture Brush

Ima produžena i jaka vlakna za efektivno čišćenje

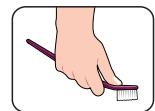

Za bolji stisak, iskrivite vrat četkice na pozadi tako što ćete ga zagrejati u toploj vodi.